




Przed użyciem należy umieścić eFOLDi Lite na otwartej przestrzeni, z dala od zwierząt domowych i małych dzieci. Rozkładanie jest łatwe, a dzięki praktyce można je ustawić w kilka sekund. Zalecamy poćwiczenie przed pierwszą wycieczką.



JAK SIĘ ROZŁOŻYĆ

KROK 1 - ODBLOKOWANIE KOLUMNY KIEROWNICY

Przed rozpoczęciem usuń wszystkie opakowania.

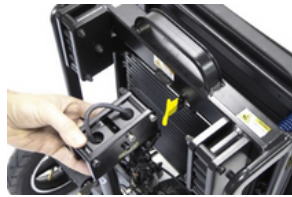

Naciśnij żółty zatrzask, aby zwolnić kolumnę kierownicy, umożliwiając jej swobodny obrót.

Podnieś kierownicę na zewnątrz i do góry, aż zatrzask się w pozycji pionowej.

KROK 2 - ODBLOKOWANIE I ROZŁOŻENIE



Przytrzymaj kolumnę kierownicy i znajdź mały żółty przełącznik z boku Lite i pociągnij go, aby odblokować zespół przedniego koła.

Przytrzymaj kolumnę kierownicy i oparcie siedzenia, a następnie rozsuń je. Hulajnoga rozłoży się i usłyszysz kliknięcie, gdy zablokuje się w pozycji otwartej.

KROK 3 - KOŃCOWE KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA



Upewnij się, że zatrzaski blokujące są dobrze przymocowane do stalowego pręta, naciskając stopą na podnózek.

Sprawdź, czy czerwona dźwignia hamulca magnetycznego znajduje się w pozycji ZABLOKOWANEJ, aby włączyć silnik.

SPOSÓB DZIAŁANIA

ROZPOCZĘCIE



Aby włączyć hulajnogę, naciśnij szary przycisk pod ekranem akumulatora. Wybierz (D) dla jazdy do przodu lub (R) dla jazdy do tyłu, a następnie naciśnij kciuk przepustnicy, aby ruszyć.

Pamiętaj, aby ponownie naładować akumulator, gdy na wyświetlaczu pojawi się pomarańczowy wskaźnik.



Aby zmienić hulajnogę w toczący się bagaż, należy pociągnąć kierownicę do góry i nacisnąć żółtą dźwignię, mocując ją w drugim punkcie zatrzymania.



Aby naładować akumulator, podłącz przewód zasilający do portu ładowania znajdującego się w górnej części kolumny kierownicy.



Aby wyjąć akumulator, należy podnieść zatrask i ostrożnie pociągnąć go do góry.

Port ładowania znajduje się z boku akumulatora.


SPOSÓB SKŁADANIA

KROK 1 - SKŁADANIE OPARCIA I KOLUMNY KIEROWNICY



Złóż oparcie siedzenia płasko do podstawy siedzenia.

Naciśnij i przytrzymaj maty żółty zatrask z przodu kolumny kierownicy, a następnie złóż go w dół, aż kierownica zatrzaśnie się na swoim miejscu, zabezpieczona magnesem.

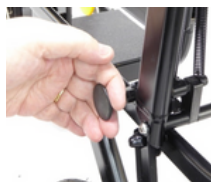

Z zamontowanymi podłokietnikami, pociągnąć czarny przelącznik, aby zwolnić siedzisko i złożyć je.

KROK 2 - ZŁOŻENIE I ZABLOKOWANIE HULAJNOGI



Chwyć hulajnogę za kolumnę kierownicy i uchwyt do przenoszenia, a następnie podnieś ramę siedziska do pozycji pionowej.

Przechyl hulajnogę do tyłu pod kątem (w razie potrzeby możesz użyć stopy za kierownicą, aby ją ustabilizować), wyważając ją na kółkach.

Wciśnij kolumnę kierownicy do wewnątrz, aż przednie koło i zatrask zatrzaśną się we właściwym miejscu. Następnie mocno dociśnij kolumnę, aby zablokować ją w ramie.

Należy pamiętać, że niniejsza ulotka ma służyć wyłącznie jako skrócona instrukcja. Aby uzyskać pełne instrukcje, zapoznaj się z naszą instrukcją obsługi produktu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0800 915 0800 lub e-mailowy pod adresem services@efoldi.com.